




Per portatori astigmatici, la cui qualità di visione nelle attività quotidiane è influenzata da movimenti anche impercettibili della testa e degli occhi, che vogliono una visione chiara e stabile¹ durante le loro giornate impegnative:

ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM

EYE-INSPIRED™ Innovation | Tecnologia HydraLuxe™

Tecnologia EYELID STABILISED DESIGN

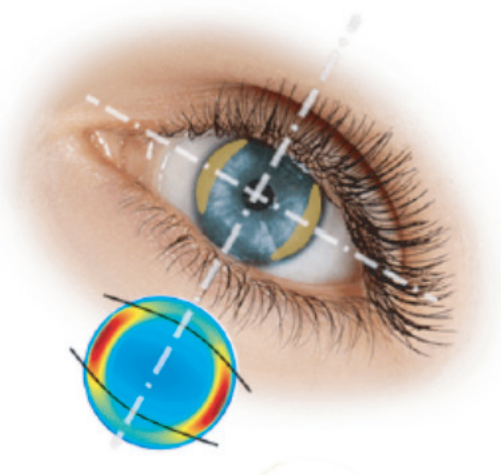

Al solo scopo illustrativo

L'orientamento delle lenti rimane stabile a prescindere dai movimenti della testa¹

Tecnologia EYELID STABILISED DESIGN (ESD)

La tecnologia ESD sfrutta il movimento naturale dell'occhio sulle quattro zone di stabilizzazione¹ (diversamente dai design tradizionali con prisma-ballast che possono essere influenzati dalla gravità in misura maggiore¹), consentendo una visione nitida e stabile^{1,2} per tutto il giorno e in ogni situazione, anche in quelle più attive.

- Si orienta e si stabilizza rapidamente in pochi minuti dall'applicazione e si riallinea naturalmente ad ogni ammiccamento.
- Nessun prisma verticale nella zona ottica.⁺¹
- Facili da applicare come le lenti sferiche.⁺¹

Ampia copertura

- Ampio range di parametri per soddisfare le diverse esigenze dei portatori astigmatici.⁴

Tecnologia HydraLuxe™

- Design unico integrato con le lacrime, composto da un reticolo fitto e uniforme di componenti simil-lacrimali e da silicone altamente traspirante, che si integra con il film lacrimale dei portatori.⁵

Elevata protezione dai raggi UV

- Filtro UV di classe 1 che blocca il 99.9% dei raggi UVB e il 96% dei raggi UVA.⁶



EYELID STABILISED
PER L'ASTIGMATISMO



AGENTE UMETTANTE
PER L'IDRATAZIONE



BLOCCO UV
PER PROTEGGERE GLI OCCHI



BORDO ASSOTTIGLIATO
PER IL COMFORT

1. JJV Data on File 2021. ACUVUE® Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM - Overall Fitting Success, Orientation Position, Rotational Stability, and Vision Performance. **2.** Jackson D, Bedell HE. Vertical heterophoria and susceptibility to visually induced motion sickness. *Strabismus*. 2012;20(1):17-23. **3.** duToit R, Ramke J, Brian G. Tolerance to prism induced by readymade spectacles: setting and using a standard. *Optom Vis Sci*. 2007;84(11):1053-1059. **4.** JJV Data on File 2020. Proportion Astigmats Accommodated with ACUVUE® Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM. **5.** JJV Data on File 2021. HydraLuxe™ Technology Definition. **6.** JJV Data on File 2020. Material Properties: 1-DAY ACUVUE® MOIST, 1-DAY ACUVUE® TruEye® and ACUVUE® OASYS 1-Day with HydraLuxe™ Technology Brand Contact Lenses and other daily disposable contact lens brands. **7.** JJVC Data on file 2015; 1-week dispensing evaluation, DW study, n=119 soft CL wearers in the U.S.



Performance ispirate al film lacrimale^{Λ5}

Uno sguardo più approfondito:

Specifiche del prodotto

Materiale	sefilcon A	Assi	10°-180° con step di 10° da piano a -6.00D
Design	EYELID STABILISED DESIGN		70°-110° e 160°-20° da -6.50D a -9.00D
Tecnologia umettante	HydraLuxe™ Technology		e da +0.25D a +4.00D
Contenuto d'acqua	38%	Trasmissibilità all'Ossigeno (Dk/t) (boundary and edge corrected)*	129x10 ⁻⁹ (-3.00D)
Curva base	8.5mm	Segni di posizionamento	Verticali (ore 12 e ore 6)
Diametro	14.3mm	Filtro UV di classe 1 ^{§6}	99.9% UVB, 96% UVA
Intervallo di poteri	Da -6.50D a -9.00D (con step di 0.50D) Da 0.00D a -6.00D (con step di 0.25D) Da +0.25D a +4.00D (con step di 0.25D)	Caratteristiche di visibilità	Tinta di visibilità
Spessore al centro	0.080mm (-3.00D)	Programma di sostituzione raccomandato	Monouso: sostituzione giornaliera
Potere del cilindro	-0.75D, -1.25D, -1.75D, -2.25D [†]	Formati disponibili	Confezione da 30 e 90 lenti

[†]cilindro -2.25D disponibile nell'intervallo di poteri piano a -6.00D e assi 20°-160° e 70°-110°.

*Trasmissibilità dell'ossigeno al centro delle lenti -3.00D con valori di Dk corretti al bordo. Unità: (cm/sec) (ml O2/ml x mm Hg) a 35°C Dk determinato con metodo polarografico.

I punti fondamentali da comunicare ai portatori sulle lenti ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM:

- ✓ La libertà e la comodità di avere delle lenti fresche e nuove ogni giorno
- ✓ Aiutano a mantenere una visione nitida e stabile per tutto il giorno, anche durante ampi movimenti della testa e degli occhi
- ✓ Elevata protezione dai raggi UV^{§6}

ACUVUE® Astigmatism Calculator

Applica con facilità e rapidità le lenti a contatto toriche.

Scansiona il QR code o visita jnvisioncare.it/calcolatore-astigmatismo



⁵Vertical heterophoria possibly caused by prism dissociation due to the presence of induced optical prism is a relevant factor for practitioners to consider when fitting toric contact lenses for monocular astigmats or those requiring a mix of toric soft contact lens designs.^{2,3} Clinical studies have not been done to fully characterize the clinical effects of differences in base down prism among different contact lenses. ⁺Based on high fit success rates, number of lenses required, and time to fit lenses during ACUVUE® Brand for ASTIGMATISM clinical studies. [§]Tutte le lenti a contatto ACUVUE® sono dotate di Filtro UV di Classe 1 o Classe 2 per aiutare a proteggere gli occhi dai raggi UV. Le Lenti a Contatto con protezione UV non sostituiscono gli occhiali da sole con lenti anti-UV in quanto non ricoprono completamente gli occhi e l'area circostante. ^ΛDesigned to support the functions of the tear film.